


Návod k použití

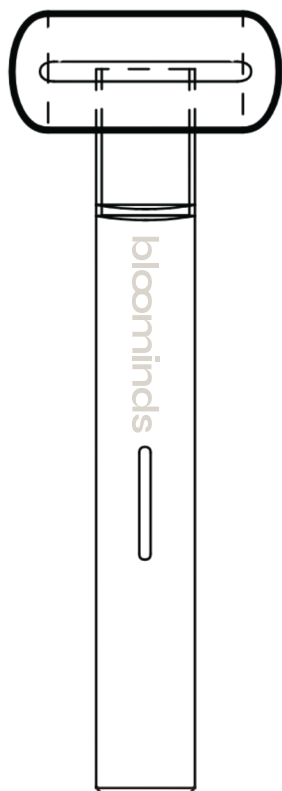

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte „Návod k použití“ pro budoucí použití a řádně jej uschovejte.

Poznámka: Pokud existují rozdíly mezi režimem v této příručce a skutečným výrobkem v důsledku iterace vzhledu výrobku, řiďte se prosím skutečným výrobkem.

Informace o výrobku

Popis produktu

Tento inovativní přístroj kombinuje přibližně 12 000 mikrovibrací za minutu s LED fotonovou terapií, hřejivým obkladem o teplotě 38–42 °C a EMS mikroproudovou stimulací. Používá se po aplikaci krému, esence či jiných pečujících produktů a pomáhá maximalizovat jejich vstřebávání. Pravidelné používání přispívá k redukci tmavých kruhů, váček a otoků pod očima, vyhlazuje jemné linky a vrásky a zpomaluje jejich vznik. Díky tomuto účinnému ošetření bude vaše pleť vypadat svěží, pevnější a mladistvější.


Hlavní funkce

1. **LED fotonová terapie** – Podporuje regeneraci pleti a zlepšuje její vzhled.
2. **Vysokofrekvenční vibrace** – Pomáhají hloubkově zapracovat pečující esence do pokožky.
3. **Hřejivý obklad (38–42 °C)** – Uvolňuje pleť, podporuje vstřebávání aktivních látek a zklidňuje pokožku.
4. **EMS mikroproudová stimulace** – Posiluje pleť, zpevňuje kontury obličeje a zlepšuje pružnost.

Speciální vlastnosti



USB-C
nabíjení

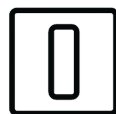

Ovládání
tlačítkem



Ergonomická otočná
masážní hlavice
(330°)

Použití světelných barev

Červená - Prokrvuje a podporuje tvorbu kolagenu, vrásek a jemných linek.

Zelená - Zlepšuje pigmentaci a melasma.

Modrá - Pomáhá eliminovat akné a kožní záněty.

Žlutá - Vyhlazuje pleť a redukuje zarudnutí.

Fialová - Uvolňuje pleť, zlepšuje lymfatickou drenáž a metabolismus.

Bílá - Urychluje metabolismus tkání.

Tyrkysová - Zklidňuje a pomáhá při alergiích.

Způsob použití

1. Naneste na oční okolí přiměřené množství očního krému nebo esence, aby byla pokožka dostatečně hydratovaná.
2. Jemně posouvejte masážní hlavici po pokožce, lehce ji nadzvedávejte a masírujte oblast kolem očí, opakujte 15–20krát.
3. Pro lepší vstřebání krému nebo esence jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku. V každém bodě setrvejte přibližně 10 sekund a postup zopakujte 2–3krát.
4. Masírovat můžete také tvář, bradu a další partie stejným způsobem. Pro dosažení liftingového efektu doporučujeme pohyb směrem nahoru.
5. Po použití očistěte masážní hlavici čistým hadříkem, vlhkým ručníkem nebo dezinfekční vatou.
6. Přístroj lze využít nejen pro masáž očních kontur, ale i celého obličeje či dalších částí těla, jako je pas nebo nohy.

Obsah balení

- 1× obličejová hůlka
- 1× USB-C nabíjecí kabel
- 1× uživatelská příručka

Nabíjení

1. Připojte USB konektor k nabíjecí hlavici 5V a konektor Type-C zapojte do nabíjecího portu na spodní části přístroje. Nabíjení probíhá automaticky bez ohledu na směr zapojení.
2. Během nabíjení kontrolka bliká.
3. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, baterie je plně nabitá.
4. Pokud kontrolka během používání často bliká, znamená to nízkou úroveň baterie a je třeba ji okamžitě nabít, jinak přístroj přestane fungovat.
5. Nabíjecí kabel uchovávejte na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho ztrátě.

Varování

1. Přístroj není vodotěsný. Uchovávejte jej mimo dosah vody, například od vany, umyvadla nebo dřezu, aby nedošlo k poškození.
2. Baterii nabíjte alespoň jednou za tři měsíce, jinak může dojít k jejímu vysušení a nevratnému poškození.
3. Masážní hlavici lze otáčet doleva i doprava, přičemž maximální rozsah otáčení je 330°.


Technické specifikace

LED diod: 12 x 0,1 W
7 světelných spekter: červená, zelená, modrá, oranžová, fialová, bílá, tyrkysová
Čočky na LED v úhlu 60°
Rozměry: 150 x 16 x 11 mm
Hmotnost: 35 g
Výkon: 1,5W
Doba nabíjení: 2 hodiny
Baterie: 350 mAh

Tipy pro ochranu očí a důležité pokyny

1. Před prvním použitím přístroj plně nabijte.
2. Před aplikací očistěte pokožku od kosmetiky a nečistot, odstraňte hodinky, náušnice, brýle, kontaktní čočky a jiné kovové doplňky.
3. Nepoužívejte během fyziologických období.
4. Přístroj není vhodný pro osoby mladší 18 let ani pro těhotné ženy.
5. Pokud máte implantované lékařské zařízení nebo jste podstoupili plastickou operaci, nepoužívejte tento výrobek.
6. Aplikujte esenci na ošetřovanou oblast, aby byla pokožka vlhká.
7. Nezůstávejte na jednom místě příliš dlouho, aby nedošlo k podráždění nebo opaření.
8. Pokud se na pokožce objeví poškození, okamžitě přestaňte přístroj používat.
9. Po ošetření pokračujte v běžné péči o pleť, například hydratační maskou.
10. Přístroj není vodotěsný – čistěte jej suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a uchovávejte v suchu.

Popis

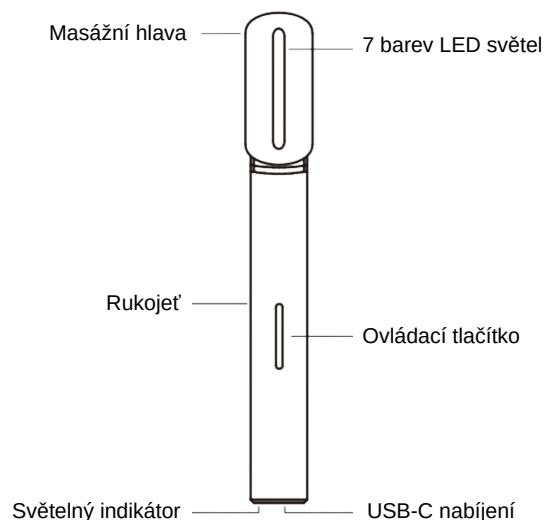

Často kladené dotazy

Proč někdy necítím mikroproud při kontaktu s kůží?

Může to být způsobeno suchou pokožkou, která zhoršuje kontakt se zařízením. Pro optimální účinek udržujte pleť hydratovanou a používejte přístroj s gelem nebo esencí.

Proč se přístroj někdy nespustí?

Důvodem může být nízký stav baterie. Doporučujeme zařízení před použitím plně nabít.

Jak často bych měl/a přístroj používat?

Optimální frekvence je 5–10 minut na ošetření, 3–5krát týdně.

Proč nemohu přístroj používat během nabíjení?

Z bezpečnostních důvodů není možné zařízení používat při nabíjení. Po úplném dobití jej můžete normálně spustit.

Je tento výrobek vodotěsný?

Ne, zařízení není vodotěsné. Nedoporučujeme jej omývat vodou – k čištění postačí vlhký hadřík.

Jak dlouho trvá nabíjení?

Plné dobití zabere přibližně 2 hodiny a baterie vydrží na 4–5 použití.

Má přístroj funkci automatického vypnutí?

Ano, z bezpečnostních důvodů se po 15 minutách provozu automaticky vypne.

bloominds

Na Perštýně 342/1
Praha
110 00
www.bloominds.cz