

bloominds

Bloominds Glow Mask

Manuál



Důležité informace před použitím

Děkujeme, že jste si zakoupili omlazující pleťovou masku Spektrum. Aby byla zajištěna její správná a bezpečná funkčnost, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Dbejte zvýšené opatrnosti u bezpečnostních pokynů, které vám pomohou masku správně ovládat a používat. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní manipulaci s přístrojem.

Po přečtení si jej pečlivě uschovejte pro budoucí reference.

Úvod do technologie

Tento inovativní přístroj využívá nanotechnologii pro precizní vedení světla, která generuje specifické světelné vlnové délky v nanojednotkách. Každá z nich cílí na různé potřeby pleti:

NIR (850 nm) – podporuje regeneraci buněk a hlubokou obnovu pleti

Červené světlo (630 nm) – stimuluje tvorbu kolagenu, redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky

Modré světlo (415 nm) – bojuje proti akné, redukuje záněty a pomáhá regulovat tvorbu mazu

Žluté světlo (605 nm) – zklidňuje pleť, zlepšuje tón pleti a rozjasňuje pokožku

Obsah balení:

obličejová maska ×1, zařízení na krk ×1, ovladač ×1, obličejové popruhy ×2, řemínky na krk ×2, chránič očí ×2, USB kabel ×1, uživatelská příručka ×1

Ovladač




Stručný návod k použití




Krok 1:

Odličte a vyčistěte pleť, aby byla připravena na ošetření.

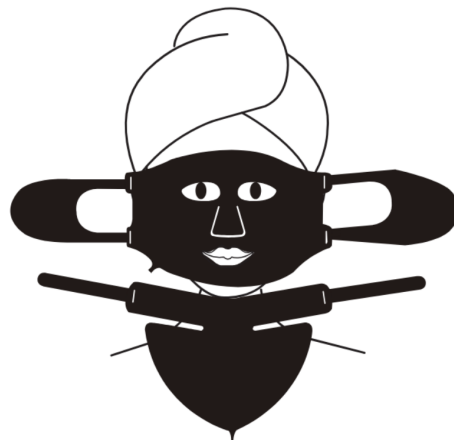

Krok 2:

Aplikujte sérum nebo masku a upevněte přístroj na hlavu pomocí pásků na suchý zip.

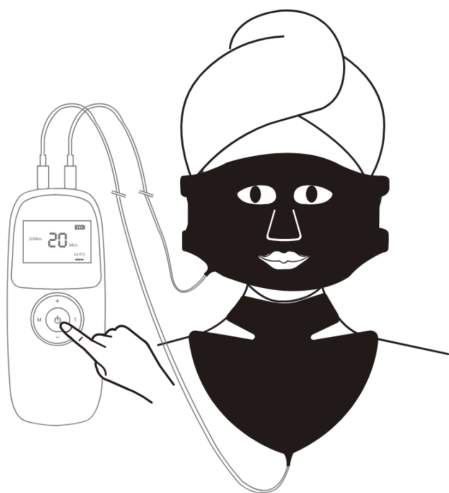

Krok 3:

Zapněte zařízení – dlouhým stisknutím tlačítka napájení (3 sekundy) spustíte program. Přístroj se automaticky vypne po 20 minutách.



Krok 4:

Po dokončení ošetření sundejte masku a naneste hydratační krém pro maximální účinek.

Návod k použití

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Po zapnutí se aktivuje automatický režim, který pracuje ve třech cyklech světelné terapie:

1. Červené světlo (5 minut) – Podporuje regeneraci buněk a působí proti stárnutí.
2. Modré světlo (5 minut) – Pomáhá při léčbě akné a zánětů.
3. Jasné světlo (5 minut) – Stimuluje prokrvení a podporuje hloubkové čištění pleti.

Po 15 minutách se zařízení automaticky vypne.

Automatický režim

Tento režim zajišťuje maximální účinnost světelné terapie přizpůsobenou různým typům pleti.

Přístroj lze vypnout kdykoli nebo krátkým stisknutím tlačítka času nastavit délku terapie:

- 15 minut
- 30 minut
- 60 minut

Doporučená délka ošetření závisí na individuálních preferencích a potřebách pleti.

Manuální režim

Krátkým stisknutím tlačítka „M“ lze nastavit intenzitu světla podle potřeby.

Nabíjení

Pokud indikátor baterie začne blikat, znamená to, že je baterie téměř vybitá.

Připojte zařízení k nabíječce co nejdříve, aby nedošlo k jeho nečekanému vypnutí.

Doporučené použití

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat omlazující masku 3–5krát týdně.

Kontraindikace a důležitá upozornění

Důležité bezpečnostní pokyny

- Chraňte zařízení před ohněm a agresivními kapalinami, jelikož nemá ohnivzdornou ochranu.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat, může dojít k poškození funkčnosti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby se zabránilo nechtěné manipulaci.
- Zařízení je vodotěsné, přesto se vyhněte dlouhodobému kontaktu s vodou.
- Nevyvíjejte nadměrný tlak na přístroj, abyste předešli deformaci či poruše.
- Modré světlo nepoužívejte dlouhodobě, aby nedošlo k podráždění pokožky.

Technické specifikace

- 368/312 x 0,2 W LED diod
- Vlnová délka: modré 415nm/oranžové 605nm/červené 636nm/infračervené 850nm
- Rozměry masky: 315 x 219 x 5 mm
- Rozměry dekoltu: 325 x 219 x 5 mm
- Hmotnost: obličejová maska 230 g, dekolt 200 g
- Výkon: 4,5W
- Napětí: 3,7V

Řešení běžných problémů

Zařízení se nezapne

- Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund.

Zařízení se zapne, ale nesvítí

- Zkontrolujte, zda je baterie vybitá, a zařízení nabijte.

Zařízení nereaguje na zapojení

- Možná vadná USB zástrčka nebo zásuvka – vyzkoušejte jiný USB kabel nebo port.

Automatické vypnutí

- Zařízení se automaticky vypne po 15, 30 nebo 60 minutách v závislosti na nastaveném čase. Pokud se vypne dříve, může být nutné jej znovu nabít.



bloominds

Na Perštýně 342/1

Praha, 110 00

www.bloominds.cz